

アクア水を活用した透析ライン洗浄

除菌

アクア水洗浄

低濃度アクア水で配管内を除菌

スケール
除去

希塩酸洗浄

低濃度塩酸でスケールを除去

洗浄

次亜塩素酸ナトリウム洗浄


高濃度次亜塩素酸ナトリウムで配管内のタンパクを除去

3種の洗浄方法を自由に組合わせて洗浄が可能です

月	火	水	木	金	土	日
除菌	除菌	除菌 洗浄	除菌	除菌 スケール除去	除菌	除菌

※洗浄プログラムの一例です

アクアM. D-1800 II 設置図

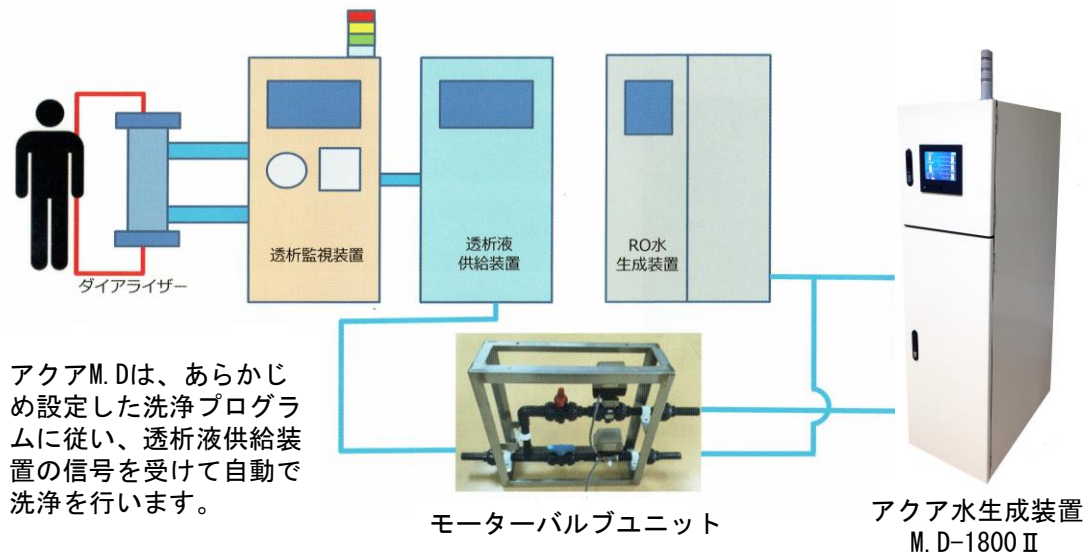

アクアM. D-1800 II 使用メリット


作業性の向上

通常洗浄時、添加液交換時ともに簡単に作業できます。

通常洗浄時作業

1. 洗浄前 → バルブを開く
2. 透析前 → バルブを閉める

洗浄作業は、透析自動供給装置との連動により、自動で洗浄水が切替わります。

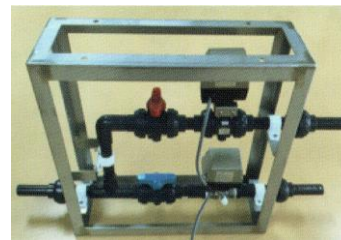

添加液交換時作業

添加液の吸込筒を差替えるだけで、女性でも簡単に交換できます。

添加液の取違い防止策により、薬液の混触を未然に防ぎます。

